



Quado

Тънко нощно шкафче - мобилен помощник

Винаги на правилното място

Мобилно нощно шкафче Quado

Новото нощно шкафче Quado от Stiegemeyer е истинско компактно чудо. Със своите функции, сведени до най-важните, то е особено подходящо за ежедневната работа в болницата. В същото време 2 отворени отделения от двете страни и чекмедже, което може да се отваря и от двете страни, предлагат достатъчно място за съхранение на личните вещи на пациента. Със своите неутрални цветове Quado се адаптира добре към обзавеждането на стаята и всяко болнично легло. Ако масата за легло не е необходима, тя може да се спусне лесно и плавно.



◀ Благодарение на помощта на газови пружини Quado може да се регулира без усилие до желаната височина от 85 до 115 см.



▲ Със своите неутрални цветове Quado се адаптира добре към обзавеждането на стаята и всяко болнично легло.



▲ Масата на легло Quado се спуска лесно и безшумно.




▲ Изтеглящата се поставка за книги под плота на леглото предлага на пациента висок комфорт при четене, без да се налага да освобождава масата (опция).

Транспорт

Легло с нощно шкафче



Quado може да се прикрепва към таблата за глава или крака за съвместно транспортиране с леглата Stiegemeyer.

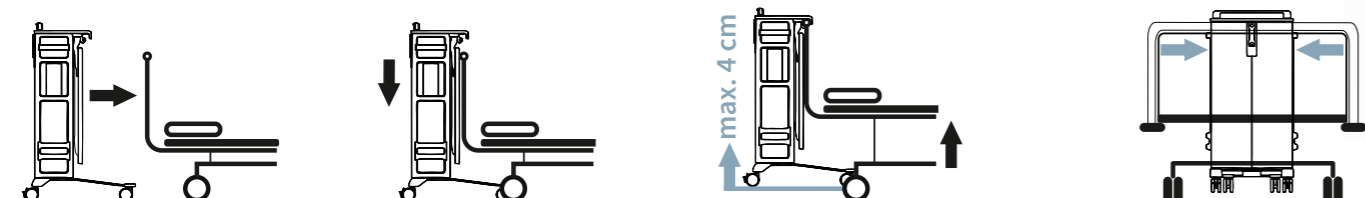

Лесното транспортиране на Quado осигурява облекчение в ежедневието. То може да се прикрепва към главата или краката на почти всички настоящи болнични легла Stiegemeyer без усилие и по този начин може да се транспортира заедно с леглото, когато пациентът се премества. Съвместното транспортиране спестява на обслужващия персонал необходимостта да пренася и, ако е необходимо, да документира личните вещи. Quado може да се придвижва заедно с леглото на своите колела. По време на транспортиране през прагове или препятствия шкафът трябва да се повдигне, като се използва

настройката за височина на леглото. След като пристигне на местоназначението си, Quado може да бъде безопасно паркиран до леглото благодарение на колелцата със спирачки.



Нощните шкафчета Quado могат да се прибират едно към друго за съхранение, за да се спести място.



Подходящо за автоматизирано измиване.


Хигиена

Надеждна обработка

Quado Подходящо за машинно измиване и лесно да се почиства ръчно. Това осигурява оптимална хигиена в болницата.



▲ Шасито осигурява висока стабилност и лесно почистване.

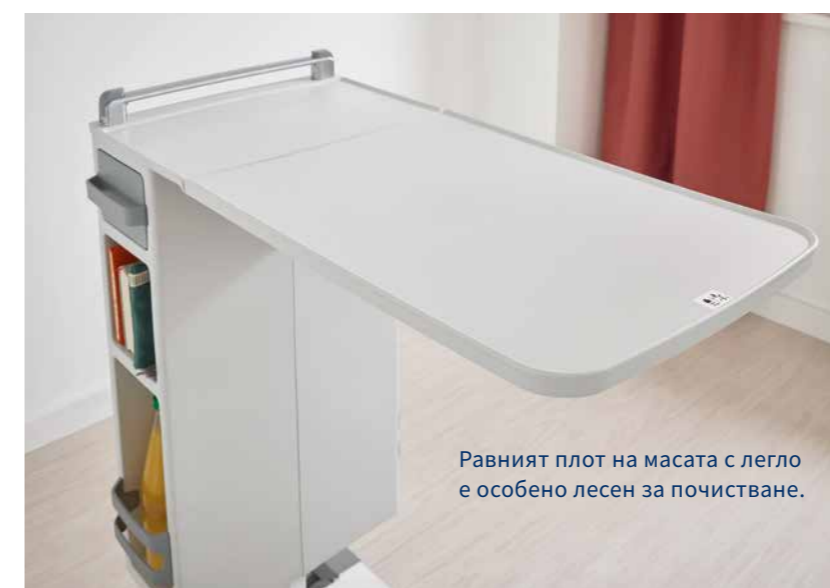

Равният плот на масата с легло е особено лесен за почистване.



▲ Хигиеничният дизайн на Quado позволява лесна и щателна обработка.

Акcesoари

Полезни допълнения



▲ С куката за кърпи на релсата на нощното шкафче кърпата е винаги под ръка за пациента.



▲ Несесерите за тоалетни принадлежности могат да се закачат близо до пациента.



▲ Прикаченият USB удължител позволява зареждане на мобилни устройства на близко разстояние от пациента.



▶ Поставката за напитки осигурява надеждно захващане на чаши и бутилки.



◀ Допълнителното отделение е подходящо за списания и други лични вещи.



▶▶ Опционалният държач за телефони и мултимедийни системи позволява използване според нуждите на пациента и особеностите на помещението.



Технически данни / Оборудване

Технически данни	
Размери и тегло	
Външни размери с надлеглова масичка (Ш x Д x В)	92 x 44,6 x 89,6 -119,6 cm
Външни размери, с прибрана надлеглова масичка (Ш x Г; вкл. шасито)	56,4 x 44,6 cm
Външни размери на корпуса (Ш x Г)	28,6 x 44,6 cm
Височина на плота на надлегловата масичка	85 -115 cm
Размери надлеглова масичка	40,7 x 57,4 cm
Общо тегло	около 25 kg
Капацитет на натоварване	
Масичка за легло (прикрепена централно)	макс. 15 kg
При изтеглено горно чекмедже (централно фиксиране, устойчивост срещу преобръщане)	2,5 kg
Горен плот	15 kg

Оборудване / Опции	
Чекмеджета	
Малко горно чекмедже	✓
Поставка за книги	0
Колела	
65 mm двойно колело (4 колела със спиращки)	✓
Цветове и материали	
Цвят на корпуса	Светлосиво NCS S1500-N
Материал на тялото	PP, PA
Цвят на шасито	Кристално бяло NCS S0500N
Материал на шасито	Стомана
Разни	
Заклучване на горното чекмедже	0
Държачи за телефонни системи	0
Адаптер за удължаване на държача за телефон	0
Подходящо за автоматизирано почистване и дезинфекция	✓
Държач за бутилка на релсата на горния плот	0
Кука за кърпи на релсата	0
Допълнително отделение от страни	0
Дълга кука на релсата	0
USB удължител	0

✓ = стандартна функция
0 = предлага се като опция



▶▶ Благодарение на гъвкавите си възможности за използване, Quadro може да бъде от полза например по време на визитации или при подготовката на място.





STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Централен офис / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185-0
Fax +49 (0) 5221 185-100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Централен офис / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
5 Shiraz Street, Oude Westhof
Bellville, 7530
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Paanakatu 5
15150 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

België / Belgique / Belgium
Distrac Group
Bleyveld 14
3320 Hoegaarden
Phone +32 (0) 16 76 82 82
info@distracgroup.com
www.distracgroup.com

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com